





CollaTape®
CollaCote®
CollaPlug®

Medicazioni di collagene riassorbibili.
Controllo del flusso ematico per favorire il processo rigenerativo.


MEDICAZIONE COLLATAPE®

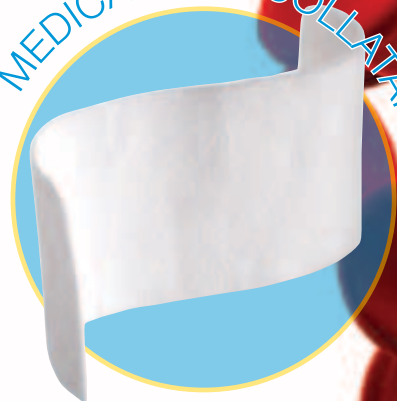

MEDICAZIONE COLLACOTE®

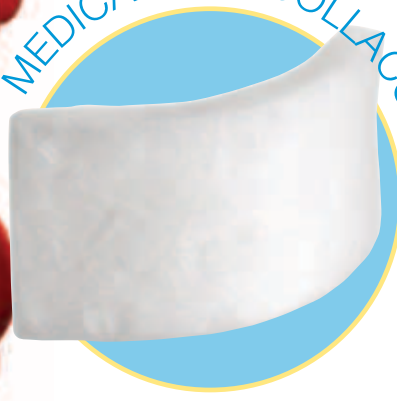

MEDICAZIONE COLLAPLUG®

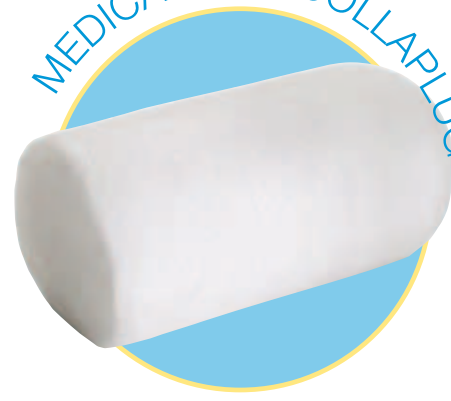

1 CONTROLLO DEL SANGUINAMENTO E STABILIZZAZIONE DEL COAGULO EMATICO¹

- Formazione del coagulo 48% più veloce rispetto alla garza in cotone²
- Tempo di emostasi: 2–2,5 minuti²

2 PROTEZIONE DEL LETTO DELLA FERITA¹

- Fornisce la matrice per la crescita tissutale interna³

3 ALTAMENTE POROSA, ALTAMENTE ASSORBENTE⁴

- La medicazione *CollaPlug*® trattiene fluidi in quantità fino a 60 volte il suo peso⁵
- Si riassorbe in 10–14 giorni²
- Struttura costituita per oltre il 90% da pori aperti^{1,3}




zimmer | dental

Indicata per applicazioni emostatiche e medicazioni nel cavo orale.


COLLATAPE®

- Difetti crestali localizzati⁶
- Innesti alveolari⁷
- Lacerazioni della membrana di Schneider⁸
- Procedure di incremento subantrale⁹
- Siti donatori di tessuto molle¹⁰

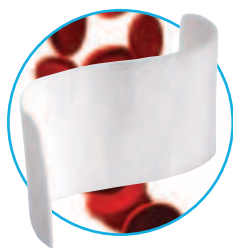


COLLACOTE®

- Rimodellamento del tessuto molle³
- Contenimento di innesti del seno mascellare⁹
- Rigenerazione ossea guidata¹¹
- Perforazione della membrana del seno mascellare^{8,12}

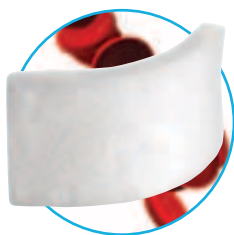

COLLAPLUG®

- Siti estrattivi^{1,13}
- Cavità a 4 pareti^{1,13}
- Siti biotici^{1,13}

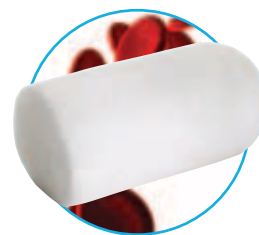

1 Estrazione dentale atraumatica.



2 Medicazione CollaPlug® e alloinest.



3 Dopo la rimozione della sutura.



4 Protesi provvisoria in situ.

Immagini cliniche del Dr. Thomas J. Miller, II, D.D.S., M.S., ©2010
Tutti i diritti riservati. I risultati individuali possono differire.

¹ Wang HL, Tsao YP. Mineralized bone allograft-plug socket augmentation: rationale and technique. *Implant Dent.* 2007;16:33-41.

² Dati in archivio presso Integra LifeSciences Corporation (tempo di coagulazione di Lee White, presentazione dei dati alla FDA).

³ Ceravalo FJ, Famili P, Li ST. Alveolar ridge augmentation utilizing collagen wound dressing. *Int J Oral Implantol.* 1987;4:15-18.

⁴ McBee WL, Koerner KR. Review of hemostatic agents used in dentistry. *Dent Today.* 2005;24:62-56.

⁵ Stein MD, Salkin LM, Feedman AL, Glushkov V. Collagen sponge as a topical hemostatic agent in mucogingival surgery. *J Periodontol.* 1985;56:35-38.

⁶ Callan DP, Salkeld SL, Scarborough N. Histologic analysis of implant sites after grafting with demineralized bone matrix putty sheets. *Implant Dent.* 2000;9:36-44.

⁷ Jackson BJ, Morcos I. Socket grafting: a predictable technique for site preservation. *J Oral Implantol.* 2007;33:353-364.

⁸ Pikos MA. Maxillary sinus membrane repair: report of a technique for large perforations. *Implant Dent.* 1999;8:29-34.

⁹ Smiler DG. The sinus lift graft: basic technique and variations. *Pract Periodontics Aesthetic Dent.* 1997;9:885-893.

¹⁰ Landsberg CJ. Implementing socket seal surgery as a socket preservation technique for pontic site development: surgical steps revisited — a report of two cases. *J Periodontol.* 2008;79:945-954.

¹¹ Ganz SD, Valen M. Predictable synthetic bone grafting procedures for implant reconstruction: part two. *J Oral Implantol.* 2002;28:178-183.

¹² McAllister BS, Margolin MD, Cogan AG, Buck D, Hollinger JO, Lynch SE. Eighteen-month radiographic and histologic evaluation of sinus grafting with anorganic bovine bone in the chimpanzee. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 1999;14:361-368.

¹³ Sclar AG. Strategies for management of single-tooth extraction sites in aesthetic implant therapy. *J Oral Maxillofac Surg.* 2005;62:90-105.

Per maggiori informazioni sulla linea di prodotti Colla, visitare il sito web www.zimmerdental.com/www.zimmerdental.it, o rivolgersi a Zimmer Dental Italy 0438 555573.

Per ricevere le nostre eNews visitateci all'indirizzo http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, materiali rigenerativi e opportunità educative, contattateci:

Negli USA 1 (800) 854-7019
Per ordini via fax 1 (888) 225-2483
Al di fuori degli USA +1 (760) 929-4300
Australia +61 (0)2 9950 5434 oppure 1 (800) 241 916
Canada + 1 (905) 567-2073 oppure 1 (800) 265-0968

Francia +33 (0)1 45 12 35 35
Germania +49 (0)761 1 56 47 0
Israele +972 (0)3 6124242
Italia +(39) 0438 555573
Spagna +34 93 846 05 43



Zimmer Dental Italy
Via Matteotti 98
31029 Vittorio Veneto
ITALIA

www.zimmerdental.com
www.zimmerdental.it