




Piliers Hex-Lock™ Contour

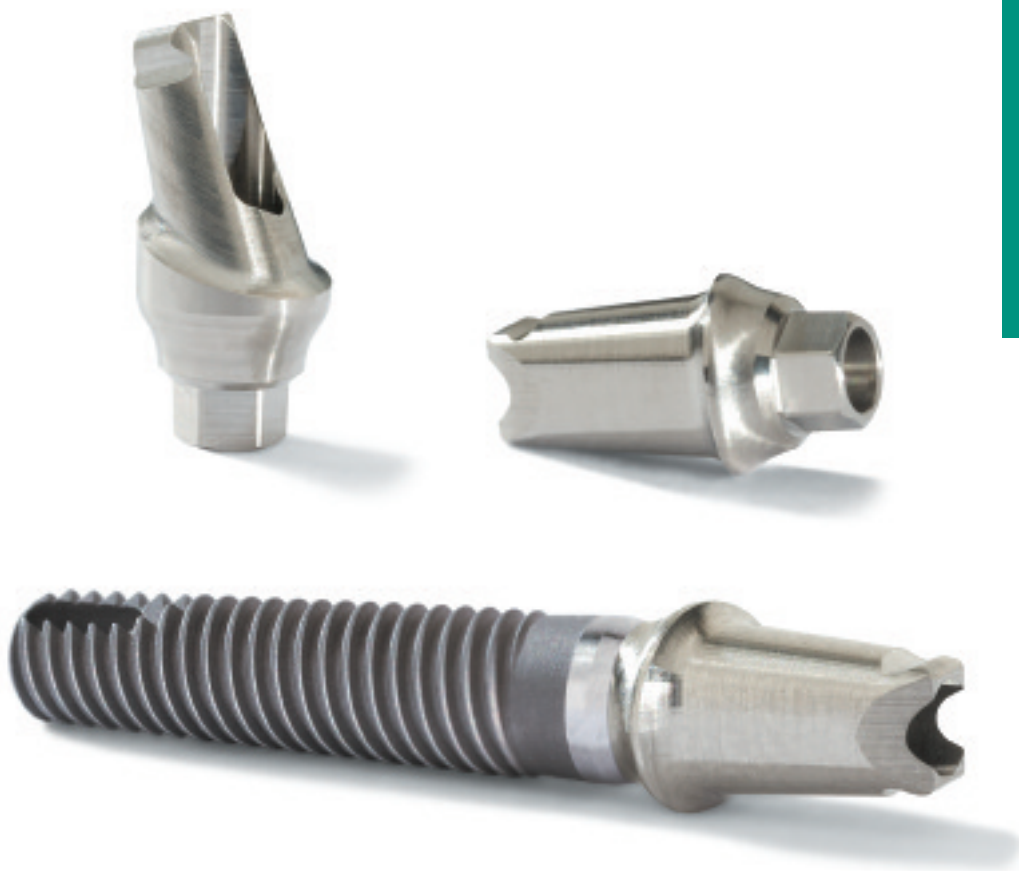

Une solution économique pour des résultats prévisibles.

Les nouveaux piliers *Hex-Lock Contour* de Zimmer Dental représentent une solution « prête à l'emploi » pour une adaptation immédiate aux divers besoins des patients. Conçus pour être utilisés avec nos systèmes d'implants *Tapered Screw-Vent®* et *Screw-Vent®* dans les cas de restaurations scellées, les piliers *Hex-Lock Contour* simplifient le processus de restauration, font gagner du temps aux cliniciens et techniciens, et offrent une souplesse d'emploi impressionnante.

Caractéristiques des piliers *Hex-Lock Contour* :

- Congés festonnés (réduction du temps de préparation)
- Grande diversité de hauteurs et profils d'émergence
- Réduction des festons vestibulaires, qui reprennent le profil des tissus mous (moins de risque d'exposition du métal en cas de récession gingivale, meilleur résultat esthétique)
- Contours sous les festons des piliers (plus d'espace autour de l'implant pour les tissus mous, sans compromettre la solidité et le résultat esthétique)
- Possibilité d'utilisation en un ou deux temps chirurgicaux
- Hexagone interne breveté de Zimmer Dental avec connexion à friction



Commodité et souplesse d'emploi.

Les piliers *Hex-Lock Contour* sont entièrement compatibles avec la gamme complète des implants *Tapered Screw-Vent* et *Screw-Vent* de Zimmer Dental. Ils contribuent à la robustesse de la connexion par hexagone interne avec calage par friction, qui élimine les micro-mouvements pour une prothèse plus fiable.

Les illustrations de droite montrent qu'un feston angulé selon une valeur prédéfinie présente une hauteur plus faible du côté buccal que du côté lingual. Les hauteurs disponibles sont de 1 mm, 2 mm et 3 mm (côté buccal) pour les piliers droits, et de 1 mm et 2 mm pour les piliers angulés à 17°. De plus, les piliers *Hex-Lock Contour* présentent un profil d'émergence plus fin à la base, ainsi que des rainures horizontales au sommet pour maintenir une coiffe d'impression. Pour assurer la résistance aux forces rotationnelles, le cône du pilier est non cylindrique et comporte une rainure verticale côté lingual.



Fig. 1 Vue avant.



Fig. 2 Vue arrière.



Fig. 3 Vue latérale.



Fig. 4 Vue en perspective.

Piliers angulés à 17°



N° de référence	ZOA341A	ZOA342A	ZOA441A	ZOA442A	ZOA451A	ZOA452A	ZOA561A	ZOA562A
Diamètre de la plate-forme	3,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	5,7 mm	5,7 mm
Profil d'émergence	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Hauteur de la coiffe	1,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	2,0 mm

Piliers droits



N° de référence	ZOA341S	ZOA342S	ZOA343S	ZOA441S	ZOA442S	ZOA443S	ZOA451S	ZOA452S
Diamètre de la plate-forme	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Profil d'émergence	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur de la coiffe	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	1,0 mm	2,0 mm



N° de référence	ZOA453S	ZOA561S	ZOA562S	ZOA563S
Diamètre de la plate-forme	4,5 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm
Profil d'émergence	5,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Hauteur de la coiffe	3,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm

Pour en savoir plus sur les piliers *Hex-Lock Contour*, visitez le site www.zimmerdental.com ou contactez l'un de nos représentants au 1 800 265 0968.

Pour recevoir le bulletin eNews, visitez la page http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

Au Canada +1 905 567 2073 ou 1 800 265 0968
Télécopieur +1 905 567 2076
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 (0)2 9950 5444
Espagne +34 93 846 05 43

France +33 (0)1 45 12 35 35
Israël +972 (0)3 6124242
États-Unis +1 760 929 4300 ou 1 800 854 7019
Autres pays +1 760 929 4300



zimmer | dental
Confidence in your hands®

Zimmer Dental Corp.
2323 Argentia Road
Mississauga, Ontario L5N 5N3
Canada

www.zimmerdental.com