

Descrizione dei prodotti chirurgici Zimmer Dental

Chirurgia tradizionale e guidata



Part No: TZKIT



Part No: DSKIT




Fresa Driva
(marcate
assialmente)



Part No: GSMOD



Part No: TADKIT

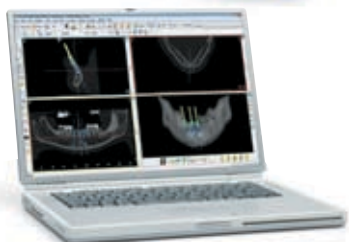

Kit Chirurgico Zimmer®

Il Kit Chirurgico *Zimmer*, è composto da strumenti singoli e da un Blocco Portastrumenti con caratteristiche uniche, è facilmente adattabile alle vostre necessità. L'organizzazione intuitiva degli strumenti e il codice colore rendono la sequenza chirurgica facile da consultare e da seguire.

Kit di Stop per Frese Zimmer®

Il nuovo Kit di Stop per Frese include una serie di stop per frese *Zimmer* in titanio, riutilizzabili e progettati per controllare la profondità di fresaggio dal piano osseo durante la preparazione dell'osteotomia. Grazie a un meccanismo «immediato» di applicazione degli stop, questo kit è progettato per risparmiare tempo alla poltrona e per facilitare il compito del medico. Gli stop per fresa sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente con le Frese *Driva™ Zimmer* durante l'inserimento degli impianti (contrassegnate con bande longitudinali).

Nuove Frese Driva

Queste frese aggiornate, progettate con un collo e flangia ridotti e due bande longitudinali, per facilitarne l'identificazione, sono richieste per essere utilizzate con il Kit di Stop per Frese *Zimmer* e/o per la strumentazione per la Chirurgia Guidata. Queste frese sostituiranno la linea esistente di Frese *Driva*, nota: i numeri di codice del prodotto rimarranno invariati).

Frese Driva EG

Sono disponibili altre Frese *Driva EG* con gambo più lungo, in due nuove lunghezze.

Insero con Frese Zimmer®

Questo inserto include sedici Frese *Driva EG* e può essere inserito nel vostro Kit Chirurgico *Tapered Screw-Vent®*.

Kit di Tubi Adattatori Zimmer®

Questi strumenti chirurgici, progettati per adattarsi nei tubi posti all'interno delle guide chirurgiche basate su modelli e su software, orientano le frese e forniscono controllo posizionale e angolare.

Chirurgia Guidata Zimmer

In arrivo ulteriori novità nel Portafoglio per Chirurgia Guidata *Zimmer*.

Software di Pianificazione del Trattamento

Software di pianificazione del trattamento e sistemi di chirurgia guidata diffusamente utilizzati

Richiedete ulteriori informazioni a un rappresentante Zimmer Dental.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, sui materiali rigenerativi e sulle opportunità educative contattateci:

Zimmer Dental Italy
Viale Matteotti, 98
31029 Vittorio Veneto (TV), Italy

Negli USA: 1 (800) 854-7019
Per ordini via fax 1 (888) 225-2483
Al di fuori degli USA: +1 (760) 929-4300
Australia +61 (0)2 9950 5444 or 1 (800) 241-916
Canada +1 (905) 567-2073 or 1 (800) 265-0968

Francia +33 (0)1 45 12 35 35
Germania +49 (0)761 1 56/47 0
Israele +972 (0)3 6124242
Italia +39.0438 55 5573
Spagna +34 93 846 05 43

Per ricevere il nostro eNews visitateci all'indirizzo http://www.zimmerdental.com/news_eNewsletterSignUp.aspx



www.zimmerdental.com



Guida alle opzioni chirurgiche



Sistema Tapered Screw-Vent®
Strumentazione chirurgica tradizionale o chirurgia guidata.



La Zimmer è orgogliosa di introdurre una linea completa di strumenti chirurgici, facilmente personalizzabili e progettati per soddisfare le vostre esigenze chirurgiche.

Il Kit di Strumenti *Zimmer*[®] per la chirurgia tradizionale offre una sequenza di fresatura intuitiva grazie al codice colore. Il Kit di Stop per Frese *Zimmer*[®], introdotto per ridurre il tempo alla poltrona e per facilitare il lavoro del medico, è progettato per eliminare la difficoltà di stimare la profondità di fresaggio durante le procedure per l'inserimento degli impianti.




L'approccio flessibile di Zimmer alla chirurgia guidata intende consentire l'inserimento degli impianti Tapered Screw-Vent, con l'aiuto di guide basate su modelli e software. La strumentazione Zimmer è progettata per consentire il collocamento degli impianti con sistemi di software per la pianificazione del trattamento diffusamente utilizzati.

La Zimmer, sempre impegnata a ottimizzare il tempo e le procedure chirurgiche, offre un'ampia varietà di soluzioni chirurgiche con la combinazione ideale di flessibilità, semplicità e convenienza.

I prodotti chirurgici Zimmer Dental

Chirurgia tradizionale

Chirurgia tradizionale

Necessità chirurgica	Tradizionale	Tradizionale con controllo di profondità
<p>Strumentazione richiesta</p>	<p>Kit Chirurgico Zimmer*</p> 	<p>Kit Chirurgico Zimmer*</p>  <p>Kit di Stop per Frese Zimmer*</p> 
<p>Posizione e controllo di angolazione</p>	<p>Valutazione visiva</p>	<p>Valutazione visiva</p>
<p>Controllo di profondità</p>	<p>Marcature di profondità della fresa</p>	<p>✓ Sì</p>
<p>Richiede software di pianificazione del trattamento</p>	<p>No</p>	<p>No</p>
<p>Disponibile ora</p>	<p>Disponibile ora</p>	<p>Disponibile ora</p>

* Sono necessarie le nuove frese *Dríva* marcate assialmente)

I prodotti chirurgici Zimmer Dental

Chirurgia guidata

Guida chirurgica basata su modelli

Kit Chirurgico Zimmer*



Inserto per Frese Zimmer utilizzabile con Frese Driva EG



Solo per fresaggio

No

No

Disponibile ora

Guida chirurgica basata su software

Kit Chirurgico Zimmer*



Inserto per Frese Zimmer utilizzabile con Frese Driva EG



Kit di Tubi Adattatori Zimmer®



Solo per fresaggio

✓ Sì

✓ Sì

Disponibile ora

Guida chirurgica basata su software

IN ARRIVO



Disponibile ora

Chirurgia guidata

* Sono necessarie le nuove frese Driva marcate assialmente)