


La solution tout en un. Un système remarquablement simple.

- La double fonction porte-implant/transfert simplifie les procédures et l'investissement financier.
- L'efficacité des spires auto-taraudantes facilite l'insertion rapide de l'implant, réduisant ainsi le temps d'intervention au fauteuil.
- L'implant *Tapered SwissPlus* comporte un double filetage qui accélère le temps d'insertion.*
- Une plate-forme de petit diamètre avec une connexion hexagonale interne est disponible pour le *Tapered SwissPlus*.



Un implant en un temps chirurgical au design unique et plus économique.

Les produits *SwissPlus* de Zimmer Dental simplifient vos cas d'implants tout en réalisant une économie incomparable. En effet, grâce à sa technologie brevetée, l'implant *SwissPlus* est fourni avec un porte-implant/transfert qui est utilisé pour l'insertion, la prise d'empreinte et comme pilier terminal. En plus de la simplicité de ce système, l'implant *SwissPlus* est fourni avec une large gamme de composants prothétiques qui répondent à tous les besoins possibles en matière de restauration.

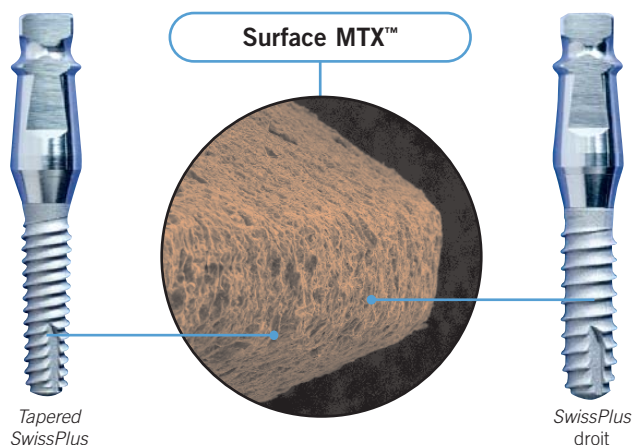

Porte-implant multi-fonction/transfert

Les implants *SwissPlus* sont fournis avec un porte-implant qui fait office de moignon d'empreinte et de pilier prothétique droit.



Insertion de l'implant
L'adaptateur sur contre-angle pour porte-implant est utilisé pour insérer l'implant autotaraudant.

Les prix peuvent être modifiés à tout moment.



Prise d'empreinte
Obturer la tête de la vis pour prendre une empreinte traditionnelle.



Préparation du pilier prothétique droit
Raccourcir et préparer le porte-implant/transfert pour l'utiliser comme pilier.

Disponibles avec notre surface MTX éprouvée**

- Rugosité de surface : 1-2 microns
- Amélioration de l'apposition osseuse par rapport aux implants usinés en titane¹⁻³
- Surface obtenue par traitement avec un matériau de sablage soluble et biocompatible
- Le procédé *MTX* n'arrondit pas le tranchant des arêtes des spires
- Les spires tranchantes restent intactes et facilitent l'autotaraudage

* En comparaison au filetage simple traditionnel.

** Nous contacter pour connaître la disponibilité des implants *SwissPlus* avec traitement *MTX*.

1. Carlsson et al, JOMI, Volume 3, numéro 1, pp. 21-24, 1998.
2. Buser et al, J of Biomedical Mat Res, Vol. 25, pp. 889-902, 1991.
3. Les résultats d'études sur des animaux ne permettent pas d'extrapoler directement les résultats sur des humains.

Pour en savoir plus sur ce produit, consultez notre site web www.zimmerdental.fr ou contactez l'un de nos représentants au 01 45 12 35 35.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos programmes professionnels et nos formations continues, contactez-nous :

En France 01 45 12 35 35
Télécopie 01 45 60 04 88
Allemagne +49 (0)761 4584 722/723
Australie +61 2 4297 4182 ou 1800 241 916
Canada +1 800 265 0968 ou 1 905 567 2073

Espagne +34 93 846 05 43
Israël +972 (0)3 6124242
USA +1 760 929 4300 ou
1 800 854 7019
Autres Pays +1 760 929 4300



Zimmer Dental SAS
1, rue Auguste Perret – SILIC 237
94528 RUNGIS Cedex
France

www.zimmerdental.fr