



Monconi Anatomici Zimmer® in Zirconia



Resistenza. Semplicità. Estetica.

La nuova linea di Monconi Anatomici in Zirconia della Zimmer Dental, progettata per essere utilizzata con il noto sistema implantare *Tapered Screw-Vent®*, offre una straordinaria combinazione di resistenza, estetica e semplicità. I Monconi Anatomici *Zimmer* realizzati in zirconia ad alta resistenza, offrono una base di colore naturale per una corona estetica, integrale in ceramica, consentendo così di ottenere una maggiore soddisfazione del paziente, in particolare nel caso di denti anteriori.

Questa serie di monconi in zirconia richiede un tempo minimo di preparazione ed è inoltre disponibile con colletti di differente altezza, fornendo in ogni situazione il Moncone Anatomico *Zimmer* in Zirconia più adatto al caso.

Caratteristiche dei Monconi Anatomici Zimmer in Zirconia:

- Materiale resistente in zirconia che garantisce una soluzione estetica e naturale
- Assenza di margini di metallo visibili in caso di retrazione dei tessuti molli
- Margini preformati per ridurre al minimo il tempo di preparazione
- Profilo del colletto del moncone che si estende al di sotto del margine, lasciando lo spazio per i tessuti molli intorno all'impianto
- Disegno dritto e angolato




Una soluzione ottimale, immediata.

I Monconi Anatomici *Zimmer* in Zirconia presentano un disegno predefinito del margine, che essendo più basso sul versante vestibolare e più alto sul versante linguale, elimina in pratica la necessità di preparare il moncone per una corona. L'anello di interfaccia in titanio fornisce una connessione titanio-titanio per un allineamento perfetto tra l'impianto e il moncone.

Questo disegno può garantire una maggiore resistenza del moncone ai micromovimenti durante il carico, riducendo quindi la possibilità di infiltrazione dei batteri, di allentamento della vite, di usura e di frattura del moncone rispetto ai monconi non dotati di questo anello di fissaggio. Garantendo eccellenti risultati clinici* ed una straordinaria praticità, i Monconi Anatomici *Zimmer* in Zirconia soddisferanno le esigenze dei vostri pazienti ed anche le vostre.



Restauro degli incisivi centrali superiori con Monconi Anatomici Zimmer in Zirconia

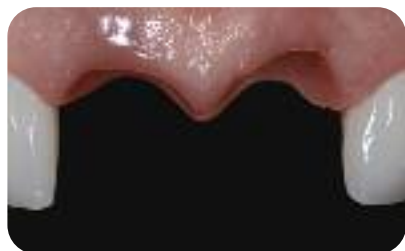

Fotografie ©2008 Paul S. Petrunaro, D.D.S., M.S. Tutti i diritti riservati. I risultati nei singoli casi possono variare.

Dritto



Codice prodotto	ZRA341S	ZRA342S	ZRA451S	ZRA452S
Diametro della piattaforma	Ø3,5 mm	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	Ø4,5 mm
Profilo di emergenza	Ø4,5 mm	Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	Ø5,5 mm
Altezza del colletto	1,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	2,0 mm

Angolato



Codice prodotto	ZRA351A	ZRA352A	ZRA461A	ZRA462A
Diametro della piattaforma	Ø3,5 mm	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	Ø4,5 mm
Profilo di emergenza	Ø5,0 mm	Ø5,0 mm	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm
Altezza del colletto	1,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	2,0 mm

*Joo W. Zimmer® Contour Ceramic Abutments. Precision-engineered for strength, esthetics & clinical versatility. Dental Inc. 2008, 2 34-38

Per ulteriori informazioni sui Monconi Anatomici *Zimmer* in Zirconia, visitateci online all'indirizzo www.zimmerdental.com oppure chiamate il numero +39 0438 555573.

Per ulteriori informazioni sui nostri Prodotti, sui nostri Programmi Professionali e sul nostro programma di Continuing Education, contattateci:

Negli USA: 800 854 7019
 Al di fuori degli USA: +1 760 929 4300
 Australia +61 (0)2 9950 5444 or 1 800 241 916
 Canada +1 905 567 2073 o 1 800 265 0968
 Francia +33 (0)1 45 12 35 35

Germania +49 (0)761 156 470
 Israele +972 (0)3 6124242
 Italia +39 0438 555573
 Spagna +34 93 846 05 43



Zimmer Dental Italy
 Viale Matteotti, 98
 31029 Vittorio Veneto (TV)
 Italy

www.zimmerdental.com